

# BIOBEAM 940

## MÁY TRỊ ĐAU NHỨC, VIÊM KHỚP, GOUT

### Giới Thiệu

BioBeam 940 ứng dụng phương pháp điều trị y khoa bằng ánh sáng quang học. Nguồn ánh sáng của BioBeam 940 có giá trị trị bệnh đặc biệt, là một tiêu biểu của nguồn ánh sáng không tìm thấy trong tự nhiên.

BioBeam 940 sử dụng nguồn ánh sáng đỏ, hẹp, có thể nhìn thấy được để giải thoát những cơn đau ở hệ thống khớp của các bệnh viêm khớp và thấp khớp như đau lưng sau và đau đầu gối. Nguồn ánh sáng này cho hiệu quả đặc biệt, giúp điều trị một cách nhanh chóng và tự nhiên.

Song hành với dòng sản phẩm này còn có BioBeam 660 là sản phẩm chuyên trị những vết sung tấy, lở loét do bệnh tiểu đường, vết phỏng, vết thương mở, mụn rộp và những thương tổn ngoài da.

**Cảnh báo:** Không nhìn thẳng vào ánh sáng, mặc dù ánh sáng sẽ yếu đi ở khoảng cách 30-40 cm nhưng người sử dụng nên tránh nhìn trong tầm nhìn của mắt thẳng vào ánh sáng.

### Lắp đặt và vận hành

1. Gắn adapter vào BioBeam 940 bằng nút nhỏ cuối dây adapter. Không được dùng bất kỳ nguồn điện nào khác.


2. Đảm bảo nút bật nguồn ở nút OFF.

3. Gắn adapter vào nguồn điện, nguồn điện phải đúng như chỉ dẫn trên adapter.

4. Để vận hành bật nút nguồn (2) ở vị trí CW hoặc PULSE. Chế độ PULSE sẽ cho công suất tăng lên, cho phép tác động sâu. Về tổng thể, thời gian điều trị trong khoảng từ 5 -30 phút ở chế độ CW và tiếp theo là 5-30 phút nữa ở chế độ PULSE.

Đèn xanh (3) sáng khi máy BioBeam 940 đã có nguồn điện và máy được vận hành đúng. Nếu đèn xanh chớp liên tục là máy đã vận hành không đúng và cần được bảo hành.

5. Để hướng ánh sáng với cường độ cao nhất vào vùng được điều trị cần điều chỉnh khoảng cách giữa máy và da, làm như vậy vùng nhỏ nhất cũng nhận được ánh sáng đỏ. Tập trung ánh sáng vào đúng vùng cần điều trị. Để tập trung ánh sáng chính xác, có thể sử dụng vòng đệm (6), lắp vòng vào máy và đặt vòng vào những điểm cần điều trị.

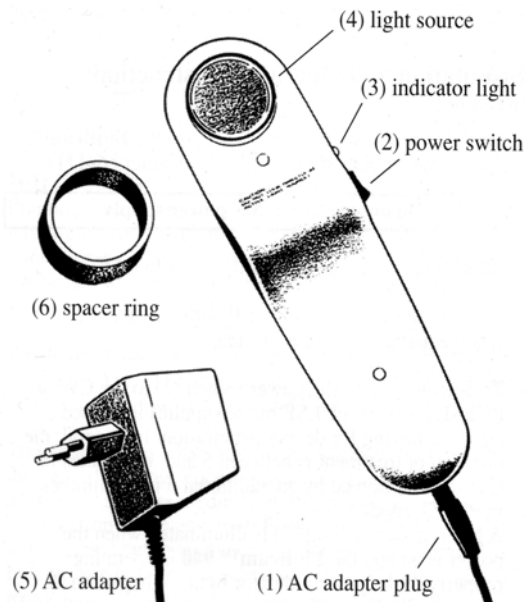

6. Sau khi sử dụng xong, bật nút nguồn ở vị trí OFF và tháo adapter ra khỏi nguồn điện.

### **Những phụ kiện của BioBeam 940**

Những phụ kiện sau đây được dùng với BioBeam 940, dùng hỗ trợ cho người dùng ở những vùng mà tay không với tới, hoặc trong trường hợp bị hạn chế về sức khoẻ hay dành cho người tàn tật.

1. Vòng đệm (6): Vòng đệm này phù hợp với kích thước đèn của BioBeam 940, dùng để tập trung ánh sáng bằng cách giữ khoảng cách cố định giữa BioBeam 940 và vùng điều trị.

2. Cánh tay hỗ trợ (phụ kiện bán riêng): cánh tay giúp bạn sử dụng BioBeam 940 một cách thoải mái mà không cần sử dụng tay để điều trị.


### **Lưu ý**

1. Để BioBeam 940 xa tầm với của trẻ em.
2. Không nhìn trực tiếp vào nguồn ánh sáng.
3. Chỉ sử dụng adapter theo máy của BioBeam 940.

### **Hướng dẫn điều trị**

Những hướng dẫn điều trị sau đây dựa trên các kinh nghiệm y khoa đã được tích lũy trong nhiều năm sử dụng. Hàng trăm tình trạng rối loạn và bệnh về khớp đã được điều trị hiệu quả:

1. Trong lúc điều trị, giữ BioBeam 940 vuông góc với vùng điều trị.
2. Trong thời gian điều trị tránh tiếp xúc trực tiếp với những nguồn ánh sáng khác.
3. Vòng đệm để dùng tập trung ánh sáng chính xác.

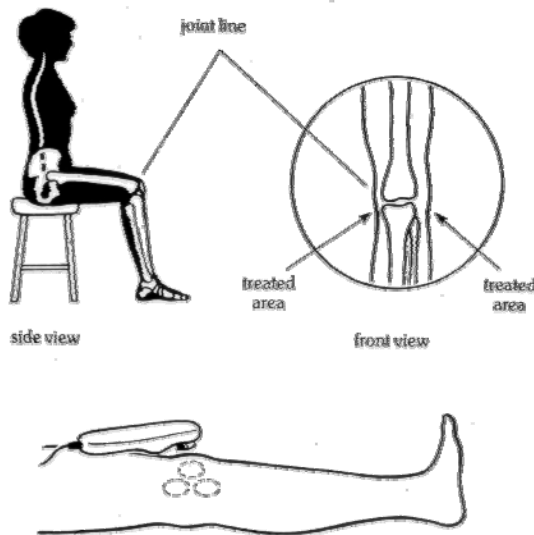

**Những bệnh sau đây được điều trị hiệu quả với máy BioBeam 940**

#### **A. Những bệnh về khớp**

Xác định đúng nơi bị đau và soi ánh sáng vào đúng vị trí đó. Vùng điều trị không được rộng hơn 2 - 3cm<sup>2</sup>.

Thông thường, bệnh về khớp và chấn thương chỉnh hình được phân làm 2 loại:

1. Đau tập trung.

2. Đau phát tán (ví dụ: đau từ cánh tay lên cổ)

Bạn có thể phân biệt giữa những điểm này bằng cách nhấn vào những điểm bị đau. Nếu ở những điểm này, bạn có cảm giác đau giống nhau thì bạn có thể kết luận là đau tập trung. Nếu bạn nhấn vào những điểm mà bạn có cảm giác đau nhưng lại không cảm thấy đau hoặc mức độ đau khác nhau, hoặc phát tán từ bộ phận này đến bộ phận khác của cơ thể tức là đau phát tán.

BioBeam 940 thích hợp cho việc điều trị đau tập trung. Trong trường hợp đau như phát tán, bạn cần phải có sự tư vấn của bác sĩ để xác định nguyên nhân, khi đó BioBeam 940 sẽ điều trị hiệu quả.



## B. Khớp

Khi điều trị khớp, ánh sáng sẽ được soi vào khu vực của khớp. Nếu bạn bị dưới đầu gối hoặc cảm giác đau từ bên trong và bên ngoài, hãy soi đèn dọc theo đường mà hai xương nối nhau bằng khớp. Ánh sáng sẽ được soi vuông góc với hai bên đầu gối.

Những trường hợp sau đây điều trị hiệu quả với BioBeam 940: Viêm khớp, sưng khớp (trong trường hợp bạn xác định được chỗ đau), đau dây chằng, viêm bao hoạt dịch, đau khuỷu, đau lưng.

### **Cách điều trị**

1. Điều trị mỗi vùng đau từ 5 đến 30 phút ở chế độ CW rồi tiếp tục chuyển sang chế độ PULSE từ 5 - 30 phút. Điều trị liên tục 3 lần/ngày, khoảng cách mỗi lần điều trị ít nhất 4 tiếng đồng hồ, vào buổi sáng và chiều tối. Kết quả tốt nhất thu được khi điều trị hằng ngày.

2. Trong trường hợp bị bệnh kinh niên thì thời gian điều trị sẽ dài hơn. Có thể đánh giá bằng việc vận động tùy theo sức khoẻ mỗi người.

3. Đối với khớp nhỏ như đốt tay và đốt chân có thể điều trị từ 10-20 phút, đầu gối từ 20-30 phút và lưng từ 30 - 60 phút.

### **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ HÙNG HY**

#### **NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM**

5-6 Khu B Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp, Tp. HCM

Tel: (08) 3984 3646 – 3984 6099 - Fax: (08) 3984 6099 - Hotline: 0903 87 77 75

Chi nhánh: 355 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, Tp. HCM Tel: (08) 3830 4679

E-mail: [hunghyco@vnn.vn](mailto:hunghyco@vnn.vn) Website: [www.hunghy.com.vn](http://www.hunghy.com.vn)